

FILE NAME: 3000394921 AOSEPL WE1

ARTIST: Chris Herman ART REV: C DATE: 02.10.2020

COLORS:
Process Black
PANTONE 185 C

SPECIAL INSTRUCTIONS:SPECIAL INSTRUCTIONS GO HERE

VENDORS PLEASE READ BELOW

COATING = 38 - 60 gloss units as measured by BYK-Gardner Micro-Gloss 60° gloss meter or similar device.

HIGH GLOSS COATING = No less than 75 gloss units as measured by BYK-Gardner Micro-Gloss 60° gloss meter or similar device.

MATTE COATING = No greater than 25 gloss units as measured by BYK-Gardner Micro-Gloss 60° gloss meter or similar device.



By Chris Herman

8:06 am, Oct 02, 2020

DRAWING INFORMATION	
DWG NUMBER:	L11715A
DWG DESC.:	INSVND 3 5/8" X 12 15/16"
DWG DATE:	FLD TO 3 5/8" X 2 3/16" DROP-IN
REV DESC.:	08/26/11

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

TOLERANCE: ± 1/32"

LEGEND

FOLD


























NO TEXT

ALCON DWG. NO. &
CONTROL DATE -
DIRECTION DETER-
MINED BY COPY.NO TEXT, COLOR OR
COATING.RESERVED FOR BAR
CODE

9 132



Alcon

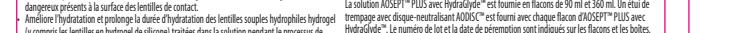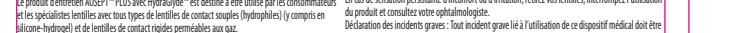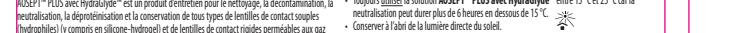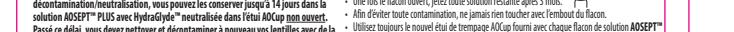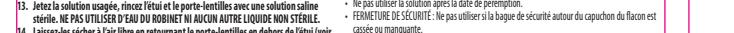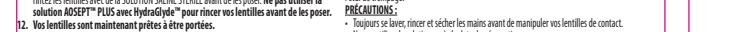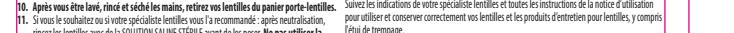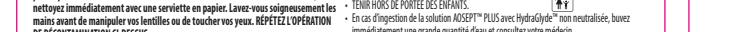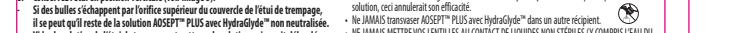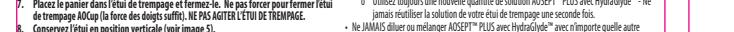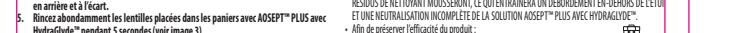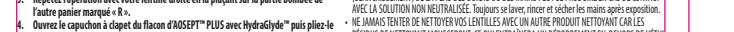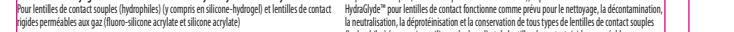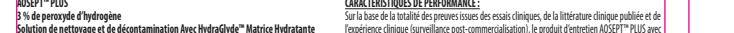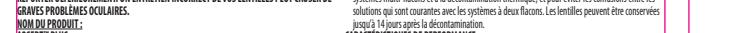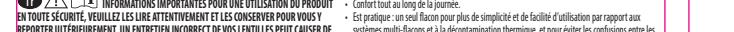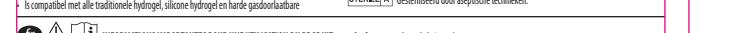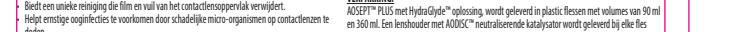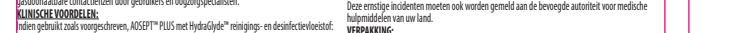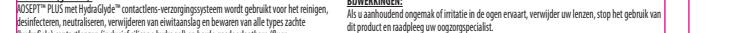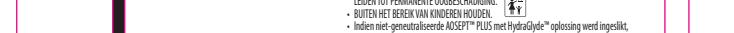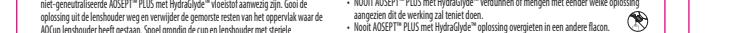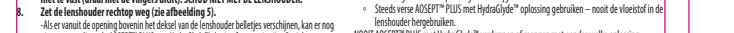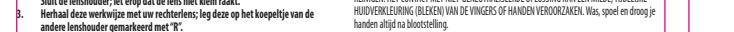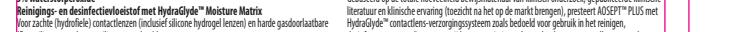

WICHTIGE GEBRAUCHS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN, BIETEN SIE IHRE LÄSSEN AUFZETSEN

DE **EN** **FR**

WICHTIGE GEBRAUCHS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN, BIETEN SIE IHRE LÄSSEN AUFZETSEN

SOMMATIVE DURCHLESEN UND ZUM NACHLESEN AUFBEWAHREN, UNSACHEGÄSSE KONTAKTLENSPFLEGE KANN ZU SCHWERWIEGENDEN AUGENPROBLEMMEN FÜHREN.

PRODUKTBESCHREIBUNG:

AOSEPT® PLUS
3% Wasserstoffperoxid
Reinigungs- und Desinfektionslösung mit Hydralyde™ Moisture Matrix
Für weiche (hydrophile) Kontaktlinsen (einschließlich Silikon-Hydrogel-Linsen) sowie formstabile, sauerstoffdurchlässige (Hydro-Silikonacrylat- und Silikonacryl-) Kontaktlinsen.

beschreibung:

Das AOEPEST® PLUS Kontaktlinsenpflegesystem mit Hydralyde™ Moisture Matrix besteht aus:
AOEPEST® PLUS Reinigungs- und Desinfektionslösung mit Hydralyde™ Moisture Matrix (siehe Abb. 1) und AOCup Linsenbehälter (AOEPEST® PLUS Linsenbehälter) (siehe Abb. 2). Der Linsenbehälter besteht aus einem transparenten Becher und einer verhundenen Einheit von Schraubverschluss, Linsenhalter (Körchen) und AODISC® Neutralisationskapselatome am unteren Ende der verhundenen Einheit angebracht ist. Vervierfacht Sie sich vor dem Gebrauch, dass der AODISC® bestreift ist, da dieser für die Neutralisation Wasserstoffperoxyd unbedingt erforderlich ist. AOEPEST® PLUS mit Hydralyde™ Lösung darf nicht zusammen mit dem AOCup Linsenbehälter (AOEPEST® PLUS Linsenbehälter) verwendet werden.

Die konserverungsmittelreiche, wässrige AOEPEST® PLUS Lösung mit Hydralyde™ Moisture Matrix enthält: Wasserstoffperoxyd 3%, Phosphorsäure (Stabilisator), Natrumchlorid, Phosphatpuffer, Poloxamer (Tensid) und Hydralyde™ Moisture Matrix (E50-21™ - Polyoxethylen-Poly(Butylene).

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Geben Sie NIEMALS AOEPEST® PLUS mit Hydralyde™ Lösung in Ihr Auge ODER direkt vor dem Aufsetzen auf eine Kontaktlinse. Die Lösung verneigt Brennen und Stechen im Auge.

1. Halten Sie die Flasche mit der AOEPEST® PLUS mit Hydralyde™ Lösung ab und legen Sie sie auf die kupferförmige Erhöhung im Körchen. Achten Sie beim Schließen des Körchens darauf, dass die Linse nicht einklemmt wird.

2. Wiederholen Sie dieses Vorgang mit der rechten Kontaktlinse und legen Sie diese auf die kupferförmige Erhöhung des mit „L“ gekennzeichneten Körchens.

3. Nehmen Sie den Klappverschluss der Flasche mit AOEPEST® PLUS mit Hydralyde™ und hängen Sie ihn an den Haken des AOCup auf.

4. Spülen Sie die Linsen in der Flasche sorgfältig mit AOEPEST® PLUS mit Hydralyde™ für 5 Sekunden ab (siehe Abb. 3).

5. Füllen Sie den Becher bis zur Füllmarkierung mit AOEPEST® PLUS mit Hydralyde™ Lösung, NICHT ZU WENG ENFÜLLEN, NICHT ÜBERFÜLLEN (siehe Abb. 4).

6. Den Linsenhalter in den Linsenbeholder einsetzen und fest verschließen. Drehen Sie den Linsenbehälter nicht zu fest um die Hand zu schaden.

7. Linsenbehälter aufzutragen (siehe Abb. 5).

8. Falls Ihnen die Kontaktlinsen schwinden sollten, legen Sie diese nicht neutralisierte AOEPEST® PLUS mit Hydralyde™ Lösung an. Die Linsen aus dem Behälter ziehen und Lösungswasser von der Fläche abwaschen, auf der die Linsenbehälter stand. Becher und Linsenhalter gründlich mit steriler Kochsalzlösung abspülen. Falls Sie etwas verschütten, nehmen Sie es sofort mit einem Papierputz auf. Waschen Sie Ihre Hände gründlich, bevor Sie Ihre Linsen oder Augen berühren. WIEDERHOLEN SIE DEN OBEN BESCHRIEBenen AUFTRAGENSSCHLUSS.

9. Die Kontaktlinsen über mindestens 5 Stunden (siehe Abb. 6) oder über Nacht in der Lösung lassen, um die Lösung zu neutralisieren.

10. Nachdem Sie Ihre Hände gewaschen, abgespült und abgetrocknet haben, nehmen Sie Ihre Linsen aus den Körchen.

11. Falls gewünscht oder von Ihrem Kontaktlinsenpasser empfohlen: Spülen Sie die Linsen nach der Neutralisation mit STERILER KOCHSALZLÖSUNG, bevor Sie sie aufsetzen. Verwenden Sie kein AOEPEST® PLUS mit Hydralyde™, um diese Linsen vor dem Aufsetzen zu spülen.

12. Das Kontaktlinsenpflegesystem aufzutragen (siehe Abb. 7).

13. Gebrachte Lösung wegspülen und den Becher und den Linsenhalter mit steriler Kochsalzlösung spülen – VERWENDEN SIE KEIN LEITUNGSWASSER ODER ANDERE UNSTERILE FLÜSSIGKEITEN.

14. Becher und Linsenhalter an der Luft trocknen lassen; dabei den Linsenhalter außenhalb des Bechers mit der Neutralisationsschleife nach unten stellen (siehe Abb. 7).

15. Wenn Sie die Kontaktlinsen sofort nach der Neutralisation neutralisieren möchten, um die AOEPEST® PLUS mit Hydralyde™ Lösung mit Hydralyde™ im ungeöffneten Linsenbehälter bis zu 14 Tage aufbewahren. Nach dieser Zeit müssen die Linsen erneut mit AOEPEST® PLUS mit Hydralyde™ wie in den obigen Schritten beschrieben gereinigt und desinfiziert werden, bevor Sie sie tragen.

INDIKATIONEN (vorgesehene Anwendung):

AOEPEST® PLUS mit Hydralyde™ Kontaktlinsenpflegesystem dient zum Reinigen, Desinfizieren, Entfernen und Neutralisieren von weichen (hydrophil) Kontaktlinsen (einschließlich Silikon-Hydrogel und formstabile, sauerstoffdurchlässige (Hydro-Silikonacrylat- und Silikonacryl) Linsen, wie von Ihren Kontaktlinsenpasser empfohlen).

VORGESCHENE ANWENDUNG: AOEPEST® PLUS mit Hydralyde™ Linsenpflegesystem ist für Kontaktlinsenträger und Kontaktlinsenpasser für weiche (hydrophil) Kontaktlinsen (einschließlich Silikon-Hydrogel und formstabile, sauerstoffdurchlässige Kontaktlinsen bestimmte KLINISCHE NUTZEN).

Bei einer vorsichtigen Anwendung leistet das AOEPEST® PLUS mit Hydralyde™ Lösung Folgendes: Sorgt für eine schnelle Reinigung, entfernt Abbaureste und Verunreinigungen von der Kontaktlinse. Hilft, schwere Augeninfektionen vorzubeugen, indem schwache Mikroorganismen auf den Kontaktlinsen abgetötet werden. Sorgt für weiche hydrophil Kontaktlinsen (einschließlich Silikon-Hydrogel) durch Behandlung im Reinigungs- und Desinfektionsprozess für eine bessere und länger anhaltende Beliebung. Minimiert die Risiken von Verunreinigungsmitteleinschlüssen, die die Wahrnehmung von Überempfindlichkeitsreaktionen auf das Produkt. Ist mit allen herkömmlichen Hydrogel-, Silikon-Hydrogel- und formstabilen, sauerstoffdurchlässigen Kontaktlinsen kompatibel. Bietet Tragekomfort den ganzen Tag.

DISCRIZIONE:

Il sistema di disinfezione per lenti a contatto AOEPEST® PLUS con Hydralyde™ Matrice Umettante contiene la soluzione detergente e disinsettante AOEPEST® PLUS con Hydralyde™ Matrice Umettante (vedi figura 1) e il portatile AOCup (vedi figura 2). Il portatile AOCup è costituito da un contenitore trasparente e relativamente tappo a vite, sommersi (coperchio) e dal neutralizzatore catalizzatore AODISC® attaccato sul fondo. Prima dell'utilizzo assicurarsi che AODISC® sia inserito e essenziale per la neutralizzazione del perioso di idrogeno. La soluzione AOEPEST® PLUS con Hydralyde™ è sempre conservata all'interno del portatile AOCup.

NON mettere MAI la soluzione AOEPEST® PLUS con Hydralyde™ direttamente nello specchio OPPURE su una lente a contatto subito prima di applicarla. Ci provocherebbe bruciore e irritazione.

1. Lavare e asciugare con un asciugamano pulito o privo di frammenti.

2. Aprire lo scatolo del portatile e trascrivere sulla lettera "L", posizionare la lente sulla lingua e tenere il coperchio aperto. Chiudere lo stampo facendo attenzione a non pizzicare la lente.

3. Ripetere la procedura con la lente destra, posizionandola nello stampo contrassegnato con la lettera "R".

4. Aprire il coperchio a scatto del flacone di AOEPEST® PLUS con Hydralyde™ ripiegandolo all'indietro in modo da liberare l'apertura.

5. Sciacquare la lente con la soluzione di AOEPEST® PLUS con Hydralyde™ e sciacquare il portatile e rimuovere i residui dalla superficie sulla quale era appoggiato il contenitore AOCup. Riciccare accuratamente il contenitore e il portatile con soluzione salina sterile. In caso di fuoriuscita, pulire immediatamente le lenti e toccare gli occhi. RIPETERE LA PROCEDURA DI DISINFESTAZIONE DI CUI GIÀ INFORMATO.

6. Lasciare le lenti in immersione per almeno 6 ore (vedi figura 6) o per tutta la notte per neutralizzare la soluzione.

7. Lavare, sciacquare e asciugare le mani prima di togliere le lenti dai portatori.

Se si lo desidera o è consigliato dal vostro specialisto di fiducia: Sciacquare le lenti con soluzione salina sterile prima di applicare. Non utilizzare AOEPEST® PLUS con Hydralyde™ per sciacquare le lenti prima di applicare.

8. Asciugare le lenti con un asciugamano pulito e asciugare le mani.

9. Gettare la soluzione utilizzata, riciccare il contenitore e i portatori con soluzione salina sterile. - NON UTILIZZARE ACQUA DI RUBINETTO E LIQUIDI NON STERILI.

10. Fare acciuffare all'aria il contenitore estremo e capovolgendo il portatile (vedi figura 7). Non appoggiate il contenitore sul fianco.

11. Se le lenti non vengono indossate subito dopo la disinfezione/neutralizzazione, possono essere conservate nella soluzione neutralizzata AOEPEST® PLUS con Hydralyde™ fino a 14 giorni, se il portatile AOCup non viene aperto. Trascorso tale termine, le lenti devono essere pulite e disinfectate con soluzione AOEPEST® PLUS con Hydralyde™ prima di essere indossate.

INDICATIONI (uso):

AOEPEST® PLUS con Hydralyde™ è un sistema per la manutenzione della lente per pulire, disinfezare, rimuovere le proteine e conservare tutti i tipi di lenti a contatto (idrofile) inclusi in silikonidrofile e rigide gas permeabili nella soluzione (in silikon acrilato e silikon acrilato), secondo i più comuni criteri di pulizia e disinfezione.

UTILIZZATORI PREFERITI: AOEPEST® PLUS con Hydralyde™ è un sistema per la manutenzione della lente a contatto (idrofile) (in silikon idrofile) e rigide gas permeabili, destinato all'uso da parte di consumatori e specialisti.

BENEFICI CLINICI:

Usa secondo le istruzioni, AOEPEST® PLUS Soluzione con Hydralyde™, fornisce una straordinaria azione pulente che elmina quasi residuo di lacrimale o altro dalla superficie della lente a contatto.

• Permette una idratazione della superfcie delle lenti morbide idrofile in idrofile (inclusi le lenti in silikon idrofile) mantenute nella soluzione durante il trattamento di pulizia e disinfezione.

• Consente una conservazione riduce al minimo la probabilità di persistenza di prodotti.

• È compatibile con tutte le lenti a contatto idrofile e rigide gas permeabili.

• Permette di uscire dall'acqua senza difficoltà e facilmente (inclusi i sistemi con più faconi) o alla disinfezione termica, inoltre fa lo scambio acido-base di liquidi del sistema a due faconi. Le lenti possono essere conservate fino a 14 giorni dopo la disinfezione.

AOEPEST® PLUS and AODISC® are trademarks of American Optical

Datum van publicatie: 07/2020

Date d'émission: 07/2020

Stand: 07/2020

Datum van publicatie: 07/2020

© 2020 Alcon Inc.

0123

300039492 - 0722

• Ist unkompliziert in der Anwendung: Einfache Anwendung durch ein Ein-Flaschen-System im Vergleich zu Mehr-Flaschen-Systemen oder thermischer Desinfektion; verhindert im Vergleich zum Zwei-Flaschen-System die Verweichung der Lösungen. Die Linsen können nach der Desinfektion bis zu 14 Tage aufbewahrt werden.

LEISTUNGSMERKMALE:

Die gesammelten Nachweise aus klinischen Studien, veröffentlichter klinischer Fachliteratur und Erfahrungen nach der Markteinführung zeigen, dass das AOEPEST® PLUS mit Hydralyde™ Linsenpflegesystem seine Zwecke bestmöglich zum Reinigen, Desinfizieren, Neutralisieren, Entfernen von Proteinen und Aufbewahren aller weichen (hydrofilen) Kontaktlinsen (einschließlich Silikon-Hydrogel) und formstabilen, sauerstoffdurchlässigen Kontaktlinsen (Hydro-Silikonacrylat- und Silikonacryl-) Kontaktlinsen.

KONTAKTLENSEN (Gründe gegen eine Anwendung):

• Nicht verwenden, wenn Sie allergisch auf einen der Inhaltsstoffe reagieren.

• AOEPEST® PLUS mit Hydralyde™ nemals zur thermischen Desinfektion verwenden.

WARNHINWEISE:

• **Der rote Klappverschluss bedeutet: Geben Sie niemals nicht-neutralisierte AOEPEST® PLUS mit Hydralyde™ Lösung direkt in das Auge.**

• **Geht die Lösung aus, muss vor dem Aufsetzen AOEPEST® PLUS mit Hydralyde™ Lösung auf eine Kontaktlinse.**

• **Die Kontaktlinsen müssen vor dem Aufsetzen mindestens 6 Stunden in dem mitgeführten Linsenbehälter belassen werden (Neutralisationsprozess). NICHT NEUTRALISIERTE AOEPEST® PLUS MIT HYDRAULYDE™ LÖSUNG IST EIN HOCHWIRKSAMES DESINFektIONSMittel, WEICHES BRENNEN UND STECHEN VERURSACHT, wenn es im Auge in Kontakt kommt. Wenn Sie versehentlich eine nicht-neutralisierte Linse auf das Auge gesetzt haben, entfernen Sie diese und waschen Sie das geschädigte Auge reichlich mit steriles Wasser oder Kontaktlinsenwasser. Wenn die Schädigung des Auges weiter besteht, kontaktieren Sie einen Arzt oder einen Augenärztlichen Berater.**

• **REINIGEN Sie Ihre LINSEN NIEMALS MIT ENTHALTENEN ZUSÄTZLICHEN REINIGER, DA DIESER DIE KONTAKTLENSEN SCHÄDEN KÖNNEN, DA DICKSTÄNDIGE DERIVATEN DER HYDRAULYDE™ LÖSUNG ZUR FOLGE HAT.**

• **REINIGEN Sie Ihre LINSEN NIEMALS MIT ENTHALTENEN ZUSÄTZLICHEN REINIGER, DA DICKSTÄNDIGE DERIVATEN DER HYDRAULYDE™ LÖSUNG ZUR FOLGE HAT.**

• **AOEPEST® PLUS mit Hydralyde™ darf NIEMALS verdünnt oder mit anderen Lösungen gemischt werden.**

• **AOEPEST® PLUS mit Hydralyde™ Lösung NIEMALS in andere Behälter umfüllen.**

• **BRINGEN Sie NIEMALS IHRE KONTAKTLENSEN MIT UNTERLERNEN FLÜSSIGKEITEN (EINSCHLIESSLICH LEITUNGSWASSER UND SPEICHE) IN KONTAKT, DA ES ZU ENERGIE MIKROBIOLEN VERUNREINIGUNG KOMMT, WELCHE ZU DAUERHAFTEN SCHÄDLICHEN SCHÄDIGUNGEN DER AUGEN FÜHREN KÖNNTE.**

• **BEVOR Sie Ihre LINSEN NIEMALS MIT ENTHALTENEN ZUSÄTZLICHEN REINIGER, DA DICKSTÄNDIGE DERIVATEN DER HYDRAULYDE™ LÖSUNG ZUR FOLGE HAT.**

• **Falls nicht-neutralisierte AOEPEST® PLUS mit Hydralyde™ Lösung verschluckt wurde, sofort große Mengen Wasser trinken und einen Arzt aufsuchen.**

• **Bevor Sie als Kontaktlinsenträger ein Arzneimittel anwenden, besprechen Sie dies mit ihrem Arzt bzw. Ihren Kontaktlinsenpasser.**

• **Bevor Sie die Anwendung ihres Kontaktlinsenpasses und alle Anweisungen der Kontaktlinsenverarbeitung annehmen und die Kontaktlinsen verwenden, der Kontaktlinsenprodukte einschließlich des Linsenbehälters.**

VORSICHTSMASSNAHMEN:

• Vor dem Umgang mit den Kontaktlinsen immer Hände waschen, abspülen und abtrocknen.

• Lösung nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

ANBRÜCHSGEDE: Bei beschädigter oder fehlender Versiegelung der Verschlusskappe nicht verwenden.

• Nicht verwenden, wenn die Packung, die Sie auf dem Etikett aufgedruckt haben, oder der Linsenbehälter ein zweites Mal verwendet.

• AOEPEST® PLUS mit Hydralyde™ darf NIEMALS verdünnt oder mit anderen Lösungen gemischt werden.

• BRINGEN Sie NIEMALS IHRE KONTAKTLENSEN MIT UNTERLERNEN FLÜSSIGKEITEN (EINSCHLIESSLICH LEITUNGSWASSER UND SPEICHE) IN KONTAKT, DA ES ZU ENERGIE MIKROBIOLEN VERUNREINIGUNG KOMMT, WELCHE ZU DAUERHAFTEN SCHÄDLICHEN SCHÄDIGUNGEN DER AUGEN FÜHREN KÖNNTE.

• **BEVOR Sie Ihre LINSEN NIEMALS MIT ENTHALTENEN ZUSÄTZLICHEN REINIGER, DA DICKSTÄNDIGE DERIVATEN DER HYDRAULYDE™ LÖSUNG ZUR FOLGE HAT.**

• **REINIGEN Sie Ihre LINSEN NIEMALS MIT ENTHALTENEN ZUSÄTZLICHEN REINIGER, DA DICKSTÄNDIGE DERIVATEN DER HYDRAULYDE™ LÖSUNG ZUR FOLGE HAT.**

• **AOEPEST® PLUS mit Hydralyde™ Lösung ist in Flaschen mit 90 ml und 360 ml erhältlich. Linsenbehälter mit AODC™ Neutralisator liegt jeder Flasche.**

• **AOEPEST® PLUS mit Hydralyde™ Lösung bei der Chargenbezeichnung und das Verfalldatum sind auf der Flasche und Falschflasche angegeben.**

STERILE A: Steril durch Anwendung septicis Verfahrenstechniken.

CARATTERISTICHE DI PRESTAZIONE:

Sulla base dell'insieme complessivo delle prove risultanti dalle indagini cliniche, dalla letteratura clinica pubblicata e dalle esperienze cliniche (servizi sanitari e farmaci per la cura), il sistema di pulizia, disinfezione, per pulire, disinfettare, neutralizzare, rimuovere le proteine e conservare tutti i tipi di lenti a contatto morbide (idrofile) come segue:

• **NON UTILIZZARE LA SOLUZIONE AOEPEST® PLUS con Hydralyde™ PER PIU' DI 15°C.**

• **NON METTERE MAI LA SOLUZIONE AOEPEST® PLUS con Hydralyde™ SU UNA LENTE A CONTATO subito prima di applicarla.**

• **Lasciare le lenti immerse nell'apposito portatile per almeno 6 ore (processo di neutralizzazione), prima di indossarle. LA SOLUZIONE AOEPEST® PLUS CON HYDRAULYDE™ NON NEUTRALIZZA E UN DISINFETTANTE MOLTO EFFICACE GEGEN SENSAZIONE DI BRUCIATURA.**

• **NON NEUTRALIZZA E UN DISINFETTANTE MOLTO EFFICACE GEGEN SENSAZIONE DI BRUCIATURA.**

• **NON UTILIZZARE LA SOLUZIONE AOEPEST® PLUS con Hydralyde™ PER PIU' DI 15°C.**

• **NON METTERE MAI LA SOLUZIONE AOEPEST® PLUS con Hydralyde™ SU UNA LENTE A CONTATO CON UN DETERGENTE SEPARATO DATO CHE I RESIDUO DETERGENTE POSSEREBBE UN'EFFERVESCIENZA PROVOCANDO LA FUORIOSCA DELLA SOLUZIONE DAL PORTAMENTO E UNA NEUTRALIZZAZIONE INCOMPLETA DELLA SOLUZIONE AOEPEST® PLUS CON HYDRAULYDE™.**

• **PRESERVARE ILFLUIDO DI FIDUCIA**

• **NON UTILIZZARE ILFLUIDO DI FIDUCIA E HYDRAULYDE™ IN UN ALTRO CONTENUTO.**

• **NON UTILIZZARE UN'ALTRA SOLUZIONE CON IL PORTAMENTO AOCUP.**

• **UTILIZZARE SEMPRE AOEPEST® PLUS con Hydralyde™ fresca – non utilizzare mai la soluzione rimasta nei portamenti una seconda volta.**

• **NON diluire o miscelare AOEPEST® PLUS con Hydralyde™ con altre sostanze in quantità perderibile la propria efficacia.**

• **NON diluire o miscelare AOEPEST® PLUS con Hydralyde™ in un altro contenitore.**

• **LE LENTI A CONTATO NON DEVONO MANTENERE A CONTATO CON LIQUIDI NON STERILI (COMPRESA ACQUA DI RUBINETTO E SALVI) POICHÉ POSSONO VERIFICARSI CONTAMINAZIONI MICROBICHE, CHE POTREBBERE COMPORTE DANNI PERMANENTI GLI OCCHI.**

• **TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.**

• **In caso di ingestione di AOEPEST® PLUS con Hydralyde™ non neutralizzata, bere immediatamente molta acqua e consultare il medico.**

• **Consigliare proprio medico o il specialisti di fiducia prima di utilizzare farmaci in concomitanza all'uso dell'apparecchio.**

Seguire le indicazioni dello specialisti di fiducia e tutte le istruzioni dell'etichetta per la cura e l'utilizzo corretto delle lenti e dei prodotti per la manutenzione delle lenti, incluso il portamenta.

PRÄVENTION:

• **Non utilizzare la soluzione dopo la data di scadenza.**

DEFIZIT A: Defizit aufgrund eines defekten Flaschenstopfers.

• **NON UTILIZZARE LA SOLUZIONE AOEPEST® PLUS con Hydralyde™ a temperatura compresa tra 25°C e 25°C, quanto a temperature inferiori a 15°C, la neutralizzazione può richiedere più di 6 ore.**

• **Conservare il gelato dalla luce diretta del sole.**

• **Consultare le specificità di fiducia prima di cambiare la soluzione di manutenzione delle lenti.**

EFFETTI AVVERSI:

• Segnalazione di incidenti gravi: Qualsiasi incidente grave correlato all'utilizzo di questo dispositivo medico dovrà essere segnalato al Alcon Laboratories, Inc.: Contattare il distributore Alcon locale.

E-mail: qa.complaints@alcon.com

Eventuali incidenti gravi devono essere anche segnalati all'autorità nazionale competente per dispositivi medici.

CONFEZIONE:

AOEPEST® PLUS Soluzione con Hydralyde™ è disponibile in confezioni da 90 ml e 360 mL. Un portamenta con neutralizzatore AODISC® viene fornito in dotazione con ogni flacone di AOEPEST® PLUS con Hydralyde™. Flacone e scatole sono contrassegnati con numero di lotto e data di scadenza.

STERILE A: Sterilizzato in aspsi

Bewegt vertegenwoerden in Europe gemeinschaft

Fabrikant / Fabricant / Representant autorisé dans l'Union Européenne

Alcon Laboratories, Inc. 6201 South Freeway, Fort Worth, Texas 76134-209 USA

Bewilligt in Europa gemeinschaft

Alcon Laboratories Belgium

Licheneval 3, 1070 Bruxelles, Belgien

Bewilligt in Europa gemeinschaft

Alcon Laboratories France

2