


All copy and logo's print 100% black unless stated

blink®

intensive tears TOP FRONT

schützende Augentropfen/gouttes ophtalmiques protectrices
10ml

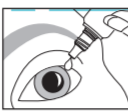

(DE) Langanhaltende Linderung bei Trockenheitsgefühl am Auge und müden Augen

Moderne Augentropfen mit spezieller Formulierung schützen und entspannen bei Trockenheitsgefühl am Auge, gereizten oder stark angestrengten Augen.

Indikationen
Für gereizte, müde Augen. Zur Anwendung mit Kontaktlinsen geeignet.

Kontraindikationen
Keine Kontraindikationen bekannt.

Anwendung

- Nach Bedarf 1 bis 2 Tropfen in das betroffene Auge geben
- Mehrmals blinzeln, um das Auge zu spülen
- So oft wie nötig anwenden
- Kontaktlinsen müssen nicht herausgenommen werden

Vorsichtsmaßnahmen

- Nicht verwenden, wenn das Sicherheitsiegel gebrochen ist oder fehlt
- Die Lösung nicht schlucken
- Bei Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe nicht anwenden
- Um Kontamination zu vermeiden, die Behälterspitze an keiner Stelle berühren und nicht direkt das Auge berühren
- Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren
- Bei 5°C bis 25°C aufbewahren
- 45 Tage nach Anbruch der Packung restliche Lösung entsorgen

Mögliche Risiken, Nebenwirkungen oder Komplikationen, die grundsätzlich beim Gebrauch von Augentropfen auftreten können: allergische Reaktionen, Entzündungen oder Infektionen

Bei anhaltenden Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Augenarzt.

Nebenwirkungen
Keine Nebenwirkungen bekannt.

Enthält:
Polyethylenglykol 400 (PEG 400) – 0,25%
OcuPure® Konservierungsmittel (Natriumchlorid)
Natriumhyaluronat – 0,20%
Borsäure
Natriumborat (Decahydrat)
Natriumchlorid
Kaliumchlorid
Kalziumchlorid (Dihydrat)
Magnesiumchlorid
Gereinigtes Wasser

(FR) Soulagement durablement de la sensation de fatigue et de sécheresse oculaires

Gouttes ophtalmiques lubrifiantes spécialement formulées pour apporter protection et confort aux yeux secs, irrités ou avec sensations désagréables.

Indications
Sensation d'inconfort, yeux irrités. Peuvent être utilisées avec les lentilles de contact.

Contre-indications
Aucune contre-indication n'est connue.

Mode d'emploi

- Placer 1 ou 2 gouttes dans l'œil, selon les besoins
- Cigner de l'œil plusieurs fois pour le nettoyer
- Utiliser aussi souvent que nécessaire
- Si vous portez des lentilles de contact, il n'est pas nécessaire de les enlever

Précautions

- Ne pas utiliser si la bague du bouchon est endommagée ou absente
- Ne pas avaler la solution
- Ne pas utiliser en cas d'allergie à l'un des composants
- Pour éviter toute contamination, ne pas mettre l'embout du flacon en contact avec quelque surface que ce soit et éviter le contact avec les yeux
- Ne pas utiliser après la date limite d'utilisation
- Garder hors de la portée des enfants
- Conservé entre 5 °C et 25 °C
- Jeter toute solution restante 45 jours après l'ouverture initiale du flacon









Les risques, effets indésirables ou complications habituellement associés aux gouttes ophtalmiques sont : réaction allergique, réaction inflammatoire ou infections

Si les problèmes persistent, veuillez consulter votre spécialiste.

Effets indésirables
Aucun effet indésirable n'est connu.

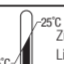
Composition :
Polyéthylène glycol 400 (PEG 400) – 0,25 %
Conservateur OcuPure® (chlorure de sodium)
Hyaluronate de sodium – 0,20 %
Acide borique
Borate de sodium (décahydrate)
Chlorure de sodium
Chlorure de potassium
Chlorure de calcium (dihydrate)
Chlorure de magnésium
Eau purifiée

Symbole • Symboles:

 Gebrauchsanweisung beachten Consulter le mode d'emploi	 Hersteller Fabricant	 25°C Zulässiger Temperaturbereich Limitation de température
 STERILE A Sterilisation durch Aseptische Technik Stérile. Technique aseptique	 LOT Lotnummer Numéro de lot	 45 Tage nach Anbruch der Packung restliche Lösung entsorgen Jeter toute solution restante 45 jours après l'ouverture initiale du flacon
 Nicht verwenden, wenn Verpackung beschädigt ist Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé	 Verfallsdatum Date de péremption	

CE 0483 **STERILE A**

AMO Ireland, Block B, Liffey Valley Office Campus
Quarryvale, Co Dublin, Ireland
© 2014 Abbott Medical Optics Inc.




ISSUED

blink®

intensive tears TOP BACK

gocce oculari lubrificanti/beschermende oogdruppels
10ml

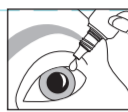

(IT) Sollievo duraturo da secchezza e stanchezza oculare

Gocce oculari lubrificanti espressamente formulate per fornire protezione e comfort da secchezza, irritazione o fastidio oculare.

Indicazioni
Sensazione di fastidio ed irritazione oculare. Il prodotto può essere usato con lenti a contatto.

Controindicazioni
Nessuna controindicazione nota.

Istruzioni per l'uso

- Instillare 1 o 2 gocce nell'occhio interessato secondo necessità
- Battere le palpebre alcune volte per lubrificare l'occhio
- Usare il prodotto con la frequenza necessaria
- Se si indossano lenti a contatto, non è necessario rimuoverle

Precauzioni

- Non utilizzare il prodotto se il sigillo antimanomissione è danneggiato o assente
- Non ingerire la soluzione
- Non utilizzare in caso di allergia ad uno qualsiasi degli ingredienti
- Per evitare la contaminazione, non lasciare che il beccuccio del flacone venga a contatto con alcuna superficie ed evitare il contatto con gli occhi
- Non utilizzare dopo la data di scadenza
- Tenere fuori dalla portata dei bambini
- Conservare a temperatura compresa tra 5 °C e 25 °C
- Eliminare tutta l'eventuale soluzione rimasta 45 giorni dopo la prima apertura del flacone
- I possibili rischi, effetti indesiderati o complicanze generalmente associati all'uso delle gocce oculari sono: reazioni allergiche, reazioni infiammatorie o infezioni

Se i problemi persistono, rivolgersi al proprio oculista.

Effetti indesiderati
Nessun effetto indesiderato noto.

Contiene:
Poliethylenglycol 400 (PEG 400) – 0,25%
OcuPure® conservante (clorito di sodio)
Ialuronato di sodio – 0,20%
Acido bórico
Borato di sodio (decaidrato)
Cloruro di sodio
Cloruro di potassio
Cloruro di calcio (dihidrato)
Cloruro di magnesio
Acqua purificata

(NL) Langdurige verlichting van het gevoel van droge, vermoeide ogen

Een geavanceerde, smerende oogdruppel die specifiek samengesteld is om bescherming en comfort te bieden aan droge, geïrriteerde of oncomfortabel voelende ogen.

Indicaties
Geïrriteerde, oncomfortabel voelende ogen. Mag in combinatie met contactlenzen gebruikt worden.

Contra-indicaties
Geen bekende contra-indicaties.

Gebruiksaanwijzing

- Naar behoefte 1 à 2 druppels in het oog doen
- Een paar keer knipperen om het oog te spoelen
- Zo vaak als nodig gebruiken
- Als u contactlenzen draagt, hoeft u ze niet uit te nemen

Voorzorgsmaatregelen









- Niet gebruiken als de veiligheidsverzegeling verbroken of afwezig is
- De vloeistof niet inslikken
- Niet gebruiken bij een allergie voor een van de bestanddelen
- Om contaminatie te voorkomen, mag de tip van de fles geen enkel oppervlak of het oog aanraken
- Niet na de uiterste gebruiksdatum gebruiken
- Buiten bereik van kinderen houden
- Bewaren beneden 5 °C tot 25 °C
- Resterende vloeistof 45 dagen nadat u de fles voor het eerst geopend hebt, weggooiën
- Mogelijke risico's, bijwerkingen of complicaties die over het algemeen gepaard gaan met oogdruppels zijn: allergische reactie, ontstekingsreactie of infecties

Als u problemen blijft hebben, bespreek die dan met uw oogarts.

Bijwerkingen
Geen bekende bijwerkingen.

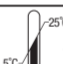
Bevat:
Polyethylenglycol 400 (PEG 400) – 0,25%
OcuPure® conserveermiddel (natriumchloride)
Natriumhyaluronaat – 0,20%
Boorzuur
Natriumborataat (decahydraat)
Natriumchloride
Kaliumchloride
Calciumchloride (dihydraat)
Magnesiumchloride
Gezuiverd water

Simboli • Symbolen:

 Consultare le istruzioni per l'uso Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor gebruik	 Fabbricante Fabrikant	 25°C Limitazione di temperatura Temperatuurlimiet
 STERILE A Sterile. Tecnica asettica Steriel. Aseptische techniek	 LOT Numero di lotto Partijnummer	 Eliminare tutta l'eventuale soluzione rimasta 45 giorni dopo la prima apertura del flacone Resterende vloeistof 45 dagen nadat u de fles voor het eerst geopend hebt, weggooiën
 Non utilizzare se la confezione è danneggiata Niet gebruiken indien de verpakking beschadigd is	 Utilizzare entro Niet gebruiken na	

AM70243GM10P
Revision Date: 07/2014

blink and OcuPure are trademarks owned by or licensed to Abbott Laboratories, its subsidiaries or affiliates.
© 2014 Abbott Medical Optics Inc.



10ml INSERT (AUTO)
207mm x 117mm
AM01194

ENTIRE INSERT TO PRINT OUT OF BLACK
DO NOT PRINT CUTTER GUIDE OR CALL OUTS

ARTWORK SPECIFICATIONS		
Part No: AM70243GM10P		
Platform: Mac Illustrator CS2		
	SIGNATURE	DATE
Packaging Coordinator	M. TAKEUCHI	9/09/14
Marketing	DC, KR, DL, JVB, ESH, AR	9/05/14
Regulatory	AB, DP, SS, DB, NB	9/05/14
Updated: 09.09.14 / 09.00		Version No: 2

Swatches used:

			Black

FOR AMO INTERNAL USE ONLY

Date:

<input type="checkbox"/> Component No.	<input type="checkbox"/> CE Mark (size, location)
<input type="checkbox"/> Drawing No.	<input type="checkbox"/> Lot and Expiry (P or P)
<input type="checkbox"/> Drawing Version No.	<input type="checkbox"/> Callouts
<input type="checkbox"/> Barcode	<input type="checkbox"/> Swatches
<input type="checkbox"/> Address	<input type="checkbox"/> Cutter not obscuring copy
<input type="checkbox"/> Sterile A	<input type="checkbox"/> Number of blacks
<input type="checkbox"/> Recycle Symbol	<input type="checkbox"/> No four-colour splits
<input type="checkbox"/> Hour glass (inserts)	<input type="checkbox"/> Artwork prepared for print
<input type="checkbox"/> Language lozenge	<input type="checkbox"/> Project specific

Revised checklist Feb 2004.

YOUR SIGNATURE IS REQUIRED.
If signatures are NOT present, this document is NOT valid.
* Approval on file.