

All copy and logo's print 100% black unless stated

TEXT DIRECTION →


TEXT DIRECTION →

blink

intensive tears

gouttes ophtalmiques lubrifiantes/schützende Augentropfen

20 x 0.4ml

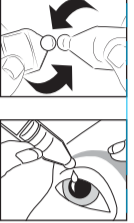

(F) Soulagement durablement de la sensation de fatigue et de sécheresse oculaires.
Gouttes ophtalmiques lubrifiantes spécialement formulées pour la protection et le soulagement des yeux fatigués.

Indications
Sensation d'inconfort, yeux irrités. Peuvent être utilisés avec les lentilles de contact.

Contre-indications
Aucune contre-indication n'est connue

Mode d'emploi

- Placer 1 ou 2 gouttes dans l'œil, selon les besoins
- Cligner plusieurs fois pour laver l'œil
- Utiliser aussi souvent que nécessaire
- Si vous portez des lentilles de contact, il n'est pas nécessaire de les enlever

Précautions

- Toujours utiliser une dosette neuve
- Ne pas utiliser si la dosette est endommagée
- Ne pas avaler la solution
- Ne pas utiliser en cas d'allergie à l'un des composants
- Pour éviter tout risque de contamination, se garder de tout contact avec l'embout du flacon
- Ne pas utiliser après la date limite d'utilisation
- Garder hors de la portée des enfants
- Conserver à température ambiante
- Jeter la dosette immédiatement après usage
- Les risques, effets indésirables ou complications éventuellement associés aux gouttes ophtalmiques sont : réaction allergique, réaction inflammatoire ou infections

Si les problèmes persistent, veuillez consulter votre spécialiste.

Effets indésirables
Aucun effet indésirable n'est connu

Composition :
Polyéthylène glycol 400 (PEG 400) – 0,25 %
Hyaluronate de sodium – 0,20 %
Acide borique
Borate de sodium (décahydrate)
Chlorure de sodium
Chlorure de potassium
Chlorure de calcium (dihydrate)
Chlorure de magnésium
Eau purifiée

(D) Langanhaltende Linderung bei Trockenheitsgefühl am Auge und müden Augen.
Moderne Augentropfen mit spezieller Formulierung schützen und entspannen bei Trockenheitsgefühl am Auge, gereizten oder stark angestregten Augen.

Indikationen
Für gereizte, müde Augen. Zur Anwendung bei Kontaktlinsen geeignet.

Kontraindikationen
Keine Kontraindikationen bekannt

Anwendung

- Nach Bedarf 1 bis 2 Tropfen in das betroffene Auge geben
- Mehrmals blinzeln, um das Auge zu spülen
- So oft wie nötig anwenden
- Kontaktlinsen müssen nicht herausgenommen werden

Vorsichtsmaßnahmen

- Immer nur frische Lösung anwenden
- Bei beschädigtem Dosierbehälter nicht verwenden
- Die Lösung nicht schlucken
- Bei Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe nicht anwenden
- Um Kontamination zu vermeiden, die Behälterspitze an keiner Stelle berühren und nicht direkt das Auge berühren
- Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren
- Bei Raumtemperatur aufbewahren
- Nach Verwendung Behälter und restliche Lösung unverzüglich entsorgen
- Mögliche Risiken, Nebenwirkungen oder Komplikationen, die grundsätzlich beim Gebrauch von Augentropfen auftreten können: Allergische Reaktionen, Entzündungen oder Infektionen

Bei anhaltenden Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Augenarzt.

Nebenwirkungen
Keine Nebenwirkungen bekannt


Enthält:
Polyethylenglykol 400 (PEG 400) – 0,25%
Natriumhyaluronat – 0,20%
Borsäure
Natriumborat (Decahydrat)
Natriumchlorid
Kaliumchlorid
Kalziumchlorid (Dihydrat)
Magnesiumchlorid
Gereinigtes Wasser

Symboles • Symbole

| | | | |
|--|---|--|--|
| | Consulter les instructions d'utilisation Gebrauchsanweisung beachten | | Fabricant Hersteller |
| | Stérile - Technique aseptique Steril - Aseptische Technik | | Ne pas réutiliser Nicht wiederverwenden |
| | Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé Nicht verwenden, wenn Verpackung beschädigt ist | | Numéro de lot Chargen-Bez. |
| | Date limite d'utilisation Verwendbar bis | | |

CE 0483 **STERILE A**

AMO Ireland
Block B, Liffey Valley Office Campus
Quarryvale, Co. Dublin, Ireland
©2010 Abbott Medical Optics Inc.




blink

intensive tears

gocce oculari lubrificanti/beschermende oogdruppels

20 x 0.4ml

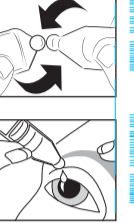

(I) Sollievo duraturo da secchezza e stanchezza oculare.
Gocce oculari lubrificanti espressamente formulate per fornire protezione e comfort da secchezza, irritazione o fastidio oculare.

Indicazioni
Sensazione di fastidio ed irritazione oculare. Può essere usato con lenti a contatto.

Controindicazioni
Nessuna controindicazione nota

Istruzioni per l'uso

- Instillare 1 o 2 gocce nell'occhio interessato secondo necessità
- Battere le palpebre alcune volte per lubrificare l'occhio
- Usare il prodotto con la frequenza necessaria
- Se si indossano lenti a contatto, non è necessario rimuoverle

Precauzioni

- Utilizzare sempre soluzione fresca
- Non utilizzare il prodotto se il contenitore della dose unitaria è danneggiato
- Non ingerire la soluzione
- Non utilizzare in caso di allergia ad uno qualsiasi degli ingredienti
- Per evitare contaminazioni, non toccare con l'estremità del contagocce alcuna superficie né direttamente l'occhio.
- Non utilizzare dopo la data di scadenza
- Tenere fuori dalla portata dei bambini
- Conservare a temperatura ambiente
- Eliminare il contenitore ed eventuale soluzione rimanente immediatamente dopo l'uso
- I possibili rischi, effetti indesiderati o complicanze generalmente associati all'uso delle gocce oculari sono: reazioni allergiche, reazioni infiammatorie o infezioni

Se i problemi persistono, rivolgersi al proprio specialista di fiducia.

Effetti indesiderati
Nessun effetto indesiderato noto

Contiene:
Polietilenglicole 400 (PEG 400) – 0,25%
Ialuronato di sodio – 0,20%
Acido bórico
Sodio borato (decaidrato)
Cloruro di sodio
Cloruro di potassio
Cloruro di calcio
Cloruro di magnesio
Acqua purificata

(NL) Langdurige verlichting van het gevoel van droge, vermoeide ogen.
Een geavanceerde, smerende oogdruppel die specifiek samengesteld is om bescherming en comfort te bieden aan droge, geïrriteerde ogen.

Indicaties
Geïrriteerde, oncomfortabel voelende ogen. Mag in combinatie met contactlenzen gebruikt worden.

Contra-indicaties
Geen bekende contra-indicaties

Gebruiksaanwijzing

- Naar behoefte 1 à 2 druppels in het oog doen
- Een paar keer knippen om het oog te spoelen
- Zo vaak als nodig gebruiken
- Als u contactlenzen draagt, hoeft u ze niet uit te nemen

Voorzorgsmaatregelen

- Altijd verse vloeistof gebruiken
- Niet gebruiken als de houder van de eenheidsdosis beschadigd is
- De vloeistof niet inslikken
- Niet gebruiken bij een allergie voor een van de bestanddelen
- Om contaminatie te voorkomen mag de tip van de houder geen enkel oppervlak of het oog rechtstreeks aanraken
- Niet na de uiterste gebruiksdatum gebruiken
- Buiten bereik van kinderen houden
- Bij kamertemperatuur bewaren
- De houder en de resterende oplossing onmiddellijk na gebruik weggooiden
- Mogelijke risico's, bijwerkingen of complicaties die over het algemeen gepaard gaan met oogdruppels zijn: allergische reactie, ontstekingsreactie of infecties

Als u problemen blijft hebben, bespreek die dan met uw oogarts.

Bijwerkingen
Geen bekende bijwerkingen

Bevat:
Polyethyleenglycol 400 (PEG 400) – 0,25%
Natriumhyaluronaat – 0,20%
Boorzuur
Natriumboraat (decahydraat)
Natriumchloride
Kaliumchloride
Calciumchloride (dihydraat)
Magnesiumchloride
Gezuiverd water


Simboli • Symbolen

| | | | |
|--|---|--|--|
| | Leggere le istruzioni per l'uso Raadpleeg de gebruiksaanwijzing | | Fabbricante Geproduceerd door |
| | Sterile - Tecnica aseptica Steriel - Aseptische techniek | | Non riutilizzare Niet opnieuw gebruiken |
| | Numero di lotto Lotnummer | | Scadenza Uiterste gebruiksdatum |
| | Non utilizzare se l'imballaggio è danneggiato Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is | | |

AM70278GM10H
Revision Date: 07/2010

blink is a trademark owned by or licensed to Abbott Laboratories, its subsidiaries or affiliates.

©2010 Abbott Medical Optics Inc.



DO NOT PRINT CUTTER/GUIDE LINES OR CALLOUTS

ARTWORK SPECIFICATIONS

Part No: AM70278GM10H
Platform: Mac Illustrator CS2

| | | |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------|
| | SIGNATURE | DATE |
| Packaging Coordinator | | 9/9/10 |
| Marketing | APPROVE ON FILE FOR DC, SDA, JM, DV | DATE 9/8/10 |
| Regulatory | APPROVE ON FILE FOR EF, DP, SS | DATE 8/23/10 |

Updated: 8.20.10 Version No: 3

Swatches used:

| | | | |
|-------|--|--|--|
| | | | |
| Black | | | |

FOR AMO INTERNAL USE ONLY

Date:

| | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Component No. | <input type="checkbox"/> CE Mark (size, location) |
| <input type="checkbox"/> Drawing No. | <input type="checkbox"/> Lot and Expiry (P or P) |
| <input type="checkbox"/> Drawing Version No. | <input type="checkbox"/> Callouts |
| <input type="checkbox"/> Barcode | <input type="checkbox"/> Swatches |
| <input type="checkbox"/> Address | <input type="checkbox"/> Cutter not obscuring copy |
| <input type="checkbox"/> Sterile A | <input type="checkbox"/> Number of blacks |
| <input type="checkbox"/> Recycle Symbol | <input type="checkbox"/> No four-colour splits |
| <input type="checkbox"/> Hour glass (inserts) | <input type="checkbox"/> Artwork prepared for print |
| <input type="checkbox"/> Language lozenge | <input type="checkbox"/> Project specific |

Revised checklist Feb 2004.

YOUR SIGNATURE IS REQUIRED.
If signatures are NOT present, this document is NOT valid.
* Approval on file.

INSERT 240mm x 140mm
1 OR 2 LANGUAGES
PENCIL FOLD
AM00989