



All copy and logo's print 100% black unless stated

blink®
contacts
gouttes de confort
beruhigende Augentropfen
10ml

TOP FRONT

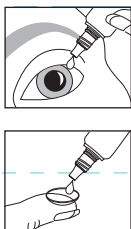

CODE 128

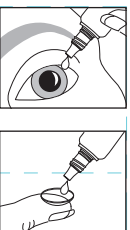

FR **Soulagent les yeux secs et fatigués des porteurs de lentilles de contact**
Conçues spécialement pour les porteurs de lentilles de contact, ces gouttes ophtalmiques apportent un soulagement immédiat et rafraîchissent les yeux secs et fatigués. Elles conviennent à toutes les lentilles de contact; il est inutile de les retirer avant l'application.

Mode d'emploi

- Instiller 1 ou 2 gouttes dans l'œil concerné, selon les besoins
- Cligner à plusieurs reprises pour le nettoyer
- Ces gouttes peuvent être utilisées aussi souvent que vous le souhaitez
- Il n'est pas nécessaire de retirer vos lentilles
- Pour plus de confort, instiller 1 ou 2 gouttes sur chaque lentille avant de la poser sur l'œil
- Convient à tous les types de lentilles de contact

Précautions d'emploi

- Ne pas utiliser si la bague du bouchon est endommagée ou absente
- Ne pas avaler la solution
- Ne pas utiliser en cas d'allergie à l'un des composants
- Pour éviter les risques de contamination, éviter tout contact avec l'embout du flacon
- Bien refermer le flacon immédiatement après utilisation
- Ne pas utiliser après la date de péremption
- Garder hors de portée des enfants
- À conserver entre 5 °C et 25 °C
- Ne pas rincer les lentilles ni l'étui à lentilles à l'eau du robinet
- Jeter toute solution restante 45 jours après l'ouverture du flacon


Si les problèmes persistent, contactez votre spécialiste.

Composition :
Hyaluronate De Sodium 0,15 %
Conservateur OcuPure® 0,005 %
Chlorure de Calcium (Dihydrate)
Chlorure de Potassium
Chlorure de Sodium
Tampon de Borate
Chlorure de Magnésium
Eau Purifiée

Symboles • Symbole


<p>Consulter les instructions d'utilisation Gebrauchsanweisung beachten</p> <p>STERILE A Stérile-Technique aseptique Sterile-Aseptische Technik</p> <p>Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé Nicht verwenden, wenn Verpackung beschädigt ist</p>	<p>Fabricant Hersteller</p> <p>LOT Numéro de lot Chargen-Bez.</p> <p>Date limite d'utilisation Verwendbar bis</p>	<p>Conditions limites de température Temperaturbeschränkung</p> <p>5°C - 25°C</p> <p>Jeter toute solution restante 45 jours après l'ouverture du flacon Lösungsreste 45 Tage nach dem Öffnen wegwerfen</p>
--	--	--

AMO Ireland
Block B, Liffey Valley Office Campus
Quarryvale, Co. Dublin, Ireland
© 2015 Abbott Medical Optics Inc.




blink®
contacts
gocce oculari lenitive
verzachtende oogdruppels
10ml

TOP BACK

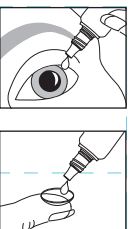

CODE 128

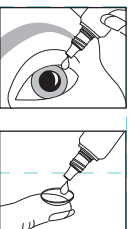

IT **Sollievo dagli occhi secchi e irritati per i portatori di lenti a contatto**
Formulate specificamente per i portatori di lenti a contatto, queste gocce oculari delicate e altamente efficaci combattono gli occhi stanchi, secchi e irritati. Idonee per tutti i tipi di lenti a contatto; non è necessario togliersi le lenti prima di applicare le gocce.

Istruzioni per l'uso

- 1 o 2 gocce nell'occhio interessato, secondo necessità
- Ammicciare varie volte con le palpebre per pulire l'occhio
- Utilizzabili con la frequenza desiderata
- Non è necessario togliere le lenti a contatto
- Per maggiore comfort, versare 1 o 2 gocce su ciascuna lente prima di inserirla
- Idonee per l'uso con tutti i tipi di lenti a contatto

Precauzioni

- Non utilizzare se il sigillo anti-manomissione è danneggiato o assente
- Non ingerire la soluzione
- Non utilizzare in caso di allergia a uno qualsiasi degli ingredienti
- Per prevenire la contaminazione evitare il contatto della punta del contenitore con qualsiasi superficie ed evitare il contatto con gli occhi
- Chiudere bene il flacone immediatamente dopo l'uso
- Non utilizzare dopo la data di scadenza
- Mantenere fuori dalla portata dei bambini
- Conservare a temperatura compresa fra 5°C e 25°C
- Non sciacquare le lenti a contatto con acqua di rubinetto
- Gettare tutta la soluzione rimanente dopo 45 giorni dalla data di apertura del flacone

In caso di problemi persistenti, rivolgersi all'oculista.

Contiene:
Sodio Ialuronato 0,15%
OcuPure® conservante 0,005%
Calcio Cloruro (Didrato)
Potassio Cloruro
Sodio Cloruro
Tampono Borato
Magnesio Cloruro
Acqua Purificata

NL **Verlichting voor dragers van contactlenzen met droge, vermoeide ogen**
Deze oogdruppels zijn speciaal geformuleerd voor dragers van contactlenzen; ze kalmeren en verwikken droge, vermoeide ogen op zachte en effectieve wijze. Geschikt voor alle contactlenzen zonder dat u eerst uw lenzen hoeft te verwijderen.

Gebruiksaanwijzing

- Druppel naar behoefte 1 of 2 druppels in het aangedane oog
- Knipper een paar keer om het oog te bevochtigen
- Mag zo vaak gebruikt worden als nodig is
- Uw lenzen hoeven niet verwijderd te worden
- Druppel voor extra comfort 1 of 2 druppels op iedere lens voor u ze indoet

Voor gebruik met alle soorten contactlenzen

Voorzorgsmaatregelen

- Niet gebruiken als de veiligheidsverzegeling verbroken of afwezig is
- De oplossing niet doorslikken
- Niet gebruiken als u allergisch bent voor een van de ingrediënten
- Om contaminatie te voorkomen, de tip van de container niet in contact brengen met enig ander oppervlak of met de ogen
- Sluit de fles onmiddellijk na gebruik goed af
- Niet na de uiterste gebruiksdatum gebruiken
- Buiten bereik van kinderen houden
- Bewaren bij 5°C tot 25°C
- Uw lenzen niet met kraanwater afspoelen
- Gooi enige resterende oplossing 45 dagen na opening weg

Als u problemen blijft houden, bespreek deze dan met uw oogspecialist.


Bevat:
Natriumhyaluronaat 0,15%
OcuPure® conserveermiddel 0,005%
Calciumchloride (Dihydraat)
Kaliumchloride
Natriumchloride
Boraatbuffer
Magnesiumchloride
Gezuiverd Water

Simboli • Symbolen

<p>Leggere le istruzioni per l'uso Raadpleeg de gebruiksaanwijzing</p> <p>STERILE A Sterile-Technica aseptica Steriel-Aseptische techniek</p> <p>Non utilizzare se l'imballaggio è danneggiato Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is</p>	<p>Fabbricante Geproduceerd door</p> <p>LOT Numero di lotto Lotnummer</p> <p>Utilizzare entro Uiterste gebruiksdatum</p>	<p>Limitazioni di temperatura Bewaartemperatuur</p> <p>5°C - 25°C</p> <p>Gettare tutta la soluzione rimanente dopo 45 giorni dalla data di apertura del flacone Gooi enige resterende oplossing 45 dagen na opening weg</p>
--	---	---

AM70488GM10A
Revision Date: 07/2015

blink and OcuPure are trademarks owned by or licensed to
Abbott Laboratories, its subsidiaries or affiliates.
© 2015 Abbott Medical Optics Inc.



10ml INSERT (AUTO)
207mm x 117mm
AM01194

ENTIRE INSERT TO PRINT OUT OF PROCESS BLACK
DO NOT PRINT CUTTER GUIDE OR CALL OUTS

ARTWORK SPECIFICATIONS		
Part No: AM70488GM10A		
Platform: Mac Illustrator CS2		
	SIGNATURE	DATE
Packaging Coordinator	<i>Alroy</i>	7/16/15
Marketing	DC	7/15/15
Regulatory	AB	7/14/15
Updated: 15.07.15 / 11.30		
Version No: 5		

Swatches used:

			Black

FOR AMO INTERNAL USE ONLY

Date:

<input type="checkbox"/> Component No.	<input type="checkbox"/> CE Mark (size, location)
<input type="checkbox"/> Drawing No.	<input type="checkbox"/> Lot and Expiry (P or P)
<input type="checkbox"/> Drawing Version No.	<input type="checkbox"/> Callouts
<input type="checkbox"/> Barcode	<input type="checkbox"/> Swatches
<input type="checkbox"/> Address	<input type="checkbox"/> Cutter not obscuring copy
<input type="checkbox"/> Sterile A	<input type="checkbox"/> Number of blacks
<input type="checkbox"/> Recycle Symbol	<input type="checkbox"/> No four-colour splits
<input type="checkbox"/> Hour glass (inserts)	<input type="checkbox"/> Artwork prepared for print
<input type="checkbox"/> Language lozenge	<input type="checkbox"/> Project specific

Revised checklist Feb 2004.

YOUR SIGNATURE IS REQUIRED.
If signatures are NOT present, this document is NOT valid.
* Approval on file.